

# NADAL®

медицинские экспресс-тесты  
для ранней диагностики онкологических заболеваний  
в Москве, регионах РФ и странах СНГ.



**NADAL®**  
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕСТ  
NADAL® ТЕСТ НА КОМПЛЕКС  
ГЕМОГЛОБИН-ГАПТОГЛОБИНА


«Экспресс-онкотестирование,  
без боли и врачей,  
в комфортных условиях на дому,  
так просто быть уверенными!»

# 7 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ


3



РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ➤

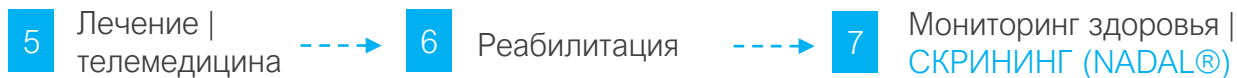

➤ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ➤ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

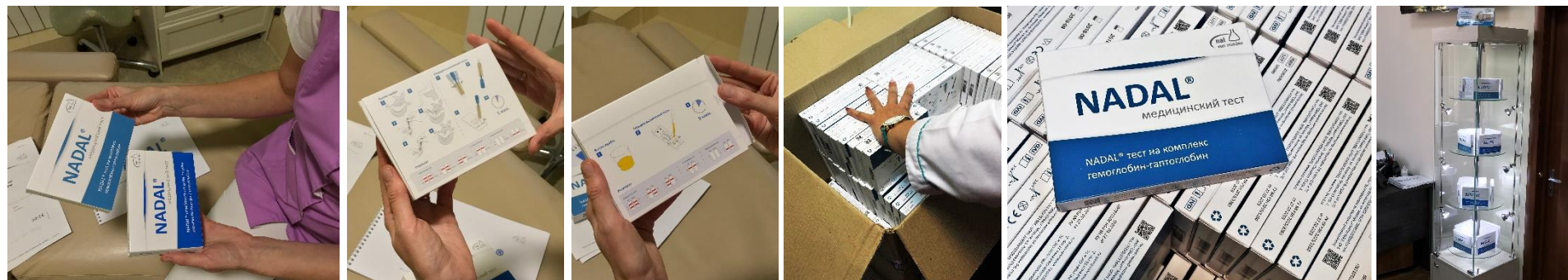

<p>ЭКСПРЕСС-ТЕСТ NADAL® на выявление рака кишечника (колоректальный рак) на ранней стадии.</p>	<p>ЭКСПРЕСС-ТЕСТ NADAL® на выявление антигена рака мочевого пузыря на ранней стадии.</p>	<p>ЭКСПРЕСС-ТЕСТ NADAL® на выявление рака простаты на ранней стадии.</p>
<p>Комбинированный метод при котором гемоглобин и комплекс гемоглобин-гаптоглобин распознается посредством специфической реакции с антителами.</p> <p>Чувствительность для комплекса гемоглобин-гаптоглобин составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для гемоглобина 97%</li> <li>- для гемоглобин-гаптоглобин 95%</li> </ul> <p>Специфичность теста на комплекс гемоглобин-гаптоглобин составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для гемоглобина 98%</li> <li>- для гемоглобина-гаптоглобина 96%</li> </ul> <p>Предел обнаружения теста на комплекс гемоглобин-гаптоглобин составляет 25 нг/мл свободного гемоглобина или гемоглобина в комплексе с гаптоглобином в буферном растворе.</p> <p>Эффект прозоны &gt; 500 000 нг/мл Специфичен по отношению к гемоглобину человека и к комплексу гемоглобин-гаптоглобин и не дает перекрестной реактивности с гемоглобином коровы, свиньи, кролика и овцы при концентрации до 0,5 мг/мл включительно в экстракционном буфере.</p>	<p>Используется уникальная комбинация моноклональных и поликлональных антител для селективного обнаружения антигена рака мочевого пузыря и гемоглобина в пробах мочи человека с высокой степенью чувствительности.</p> <p>Аналитическая чувствительность на гемоглобин 250нг/мл Аналитическая чувствительность для антигена рака мочевого пузыря (BCA) Диагностическая чувствительность 97,1 % Время проведения теста 9 мин.</p>	<p>NADAL® тест на ПСА позволяет обнаружить простатический специфический антиген с помощью визуальной интерпретации цветных линий на встроенной тест-полоске. Анти-ПСА антитела иммобилизованы на мембране в зоне линии теста. Во время тестирования проба вступает в реакцию с другими анти-ПСА антителами, конъюгированными с цветными частицами и нанесенные на подушечку для пробы встроенной тест-полоски. Далее смесь мигрирует по мембране под действием капиллярных сил и взаимодействует с реагентами на ней.</p> <p>Если концентрация ПСА в пробе составляет <math>\geq 4</math> нг/мл, в зоне линии теста (Т) на мембране возникает цветная линия. Референтная линия (R), т.е. линия для сравнения, возникает независимо от наличия ПСА. При концентрациях ПСА приблизительно 10 нг/мл интенсивность цвета линии теста (Т) и референтной линии (R) совпадают, что позволяет сделать полуколичественную оценку уровня ПСА.</p> <p>Тест надежно обнаруживает 4 нг/мл, при этом возникает слабая линия теста (Т). Чтобы гарантировать надежное формирование линии теста при 4 нг/мл, не исключено, что иногда концентрации немного ниже 4 нг/мл определяются с возникновением очень слабых линий.</p>

# NADAL®

экспресс-тест на выявление  
рака кишечника  
на ранней стадии

NADAL® тест позволяет обнаружить гемоглобин и комплекс гемоглобин-гаптоглобин в пробах кала с помощью визуальной интерпретации цветных линий на встроенной тест-полоске в течение **5 минут** с точностью **95%**, как при колоноскопии.

[ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ЕЛЕНА МАЛЫШЕВОЙ - «ЖИТЬ ЗДОРОВО»](#)

[ИНСТРУКЦИЯ \(PDF\)](#)

[ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ](#)



[КУПИТЬ ТЕСТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ](#)



# NADAL®

экспресс-тест на выявление  
антигена рака мочевого пузыря  
на ранней стадии

NADAL® тест позволяет обнаружить антиген рака мочевого пузыря и гемоглобина (Hb) в пробах мочи человека с помощью визуальной интерпретации цветных линий на встроенной тест-полоске в течение **9 минут** с точностью **97,1%**, как при цистоскопии.

[ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ЕЛЕНА МАЛЫШЕВОЙ - «ЖИТЬ ЗДОРОВО»](#)

[ИНСТРУКЦИЯ \(PDF\)](#)

[ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ](#)



[КУПИТЬ ТЕСТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ](#)



# NADAL®

экспресс-тест на выявление  
рака простаты  
на ранней стадии

NADAL® тест позволяет обнаружить простатический специфический антиген с помощью визуальной интерпретации цветных линий на встроенной тест-полоске в течение 5 минут с точностью 98,8%.

[ИНСТРУКЦИЯ \(PDF\)](#)



[ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ](#)



# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «TESTNADAL.RU»

+7 977 807-08-29

+7 499 649 73 62

Почта: [testnadal@yandex.ru](mailto:testnadal@yandex.ru)

Интернет-магазин: [www.testnadal.ru](http://www.testnadal.ru)

Центральный офис:

Москва, ул. Бережковская набережная, 6

